

# 说明书

颜色：彩色

材质：双胶纸

工艺：16p 骑马钉 单色双面印刷

尺寸：90\*120mm

**BLAUPUNKT**  
合格证  
检验员: QC PASS  
检验日期:

**BLAUPUNKT**  
User Manual  
使用说明书  
腰腹按摩仪



产品请以包装内实物为准

Enjoy it. Enjoy it.

制造商: 佛山市蓝盾科技发展有限公司  
Manufacturer: Foshan Lanshield Technology Development Co., Ltd.  
服务热线: 4009306619  
Service Hotline: 4009306619  
地址: 广东省佛山市顺德区大良街道良社区永联路8号  
Address: No. 8 Honglian Road, Jialiang Community, Daliang Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province  
www.blaupunkt.com

腰腹按摩仪  
LUMBAR MASSAGER  
BP-YF07D

**操作方式**

1. 检查产品: 请清洁腹部/腰部, 配合保湿喷雾或者润肤露, 使用效果更佳。切勿穿戴在衣服外面使用。
2. 使用前准备: 配合保湿喷雾或者润肤露使用效果更佳。
3. 开机、关机: 关机状态下长按2秒开关按钮开机/关机, 开机默认热敷40°C, 健康模式力度1档。状态指示灯亮绿色灯光, 显示屏显示40, 进入健康模式相应灯光亮起, 同时语音播报开机提示“按摩开始”, 关机语音播报“关闭按摩”。
4. 机器默认定时20分钟, 运行20分钟后自动关机进入关机状态, 并语音提示“关闭按摩”。
5. 短按开关按钮调节温度档位, 40度-45度-50度-00 (关闭热敷), 每次操作显示屏幕对应档位温度, 3秒后无操作自动跳转显示当前EMS档位 [EMS功能未开启时显示00]。并语音播报对应温度“40°C-45°C-50°C-关闭热敷”。
6. 按摩时长: 开启按摩后, 工作20分钟, 控制器停止工作, 按摩结束。
7. 低电量显示: 当机器在正常工作时电量少于10%时状态指示灯显示红色频闪5秒提示, 同时语音播报“电池电量低, 请及时充电”并关机。当机器电量少于10%时状态指示灯显示红色频闪5秒提示, 同时语音播报“电池电量低, 请及时充电”并关机。
8. EMS按摩模式调节: 短按模式按钮可循环切换按摩模式, 健康模式-拍打模式-推揉模式-运动模式-推拿模式-放松模式-关闭EMS(模式显示熄灭), 调节时对应的模式显示亮起, 并语音播报提示, 对应按摩“拍打模式”-“关闭按摩”。
9. 按摩力度调节: 当机器处于正常工作状态下并开启EMS按摩, 短按档位加“减”键“+”-“减”键调节EMS力度档位, [00-16-00] 每次操作, 显示屏亮起所选档位并语音播报对应按摩档位。
10. 当机器处于正常工作状态下, 档位调节后, EMS电流(当前档位)以每秒1指的量攀升至所选档位。
11. 当机器进入EMS按摩模式下, 按“-”号键, 无任何反馈。
12. 充电状态: 充电时状态指示灯呈现绿色呼吸灯状态, 直至充满电常亮绿色灯。
13. 空载状态: 关闭热敷和关闭EMS按摩状态下, 待机90秒自动关机, 并语音播报“关闭按摩”。

01

**本产品有害物质名称及含量标识如下表**

部件名称	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板组件※	×	○	○	○	○	○
金属件	×	○	○	○	○	○
布套	○	○	○	○	○	○

※: 电路板组件包括印刷电路板机器构成的零部件如电阻电容、集成电路、连接器等。○: 示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。×: 示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

**环保使用期限说明**

此电子电器产品在说明书所述的使用条件下使用本产品, 含有的有害物质或元素不致发生外泄, 不致对环境造成污染或对人体、财产造成严重损害(期限为10年)。

**电池废弃要求:**

- 在废弃本产品前, 应法要求, 须将电池取出。
- 在取出电池时, 产品必须断电。
- 电池应按法律法规, 安全处置。

非专业人员请勿自行拆卸!

02

**△ 注意事项**

- 请勿对不要与以下医用电子设备一起使用, 避免产生影响从而受到伤害:
  - 心脏起搏器等体内植入型医用电子设备。
  - 心电图仪等医用电子设备。
  - 加油站、医院手术室、煤气站等易燃易爆场所禁用。
  - 人工心肺等维持生命用医用电子设备。
- 如果患者在身上同时使用高频手术设备和按摩仪时, 在按摩仪电极片位置可能引起烧伤, 也可能损坏按摩仪。
- 如果在短波或微波治疗设备附近(1米)使用本产品时, 按摩仪的输出可能不稳定。
- 按摩中, 电极片应避免接触伤口及瘢痕。
- 按摩时, 电极片不可置于胸部心脏附近, 否则会增加心脏纤维颤的危险。
- 产品建议一个用户使用, 交叉用户使用时, 请清洁产品上的电极片后使用。
- 使用产品时应将电极片紧密的贴合在皮肤上, 均匀接触。
- 本产品电极片区域中间具有发热功能, 开启加热功能时, 同一部位长时间(超过20分钟)使用热敷功能时可能导致低温烫伤。
- 使用中或使用后出现身体不适, 建议停止使用, 并咨询医生。
- 本产品含有锂电池, 请勿自行拆卸、改装、水浸产品或投入火中, 否则可能导致产品损坏爆炸。
- 请勿在心脏附近、颈部上方、头部、口腔、阴部或皮肤疾患等部位使用且不能同时按摩双脚脚底。

03

- 另外, 使用时不要压迫内脏, 否则可能会发生事故或引起身体不适。
- 请勿与其他医疗器械或2台以上本产品一起使用, 否则可能会引起恶心或身体不适。
- 请勿用于使用说明书中所记载的按摩以外的目的, 否则可能会发生事故, 产生故障。
- 请勿使用表面有缺口、损坏的电极片, 否则可能会发生事故产生故障。
- 请勿擅自拆卸、修理和改造本产品, 否则可能会导致故障或触电事故。

**下列情形, 请向医生咨询后使用, 否则可能会发生事故或引起身体不适**

- 正在接受医生治疗、并感觉身体异常的患者。
- 感染性疾病的患者。
- 皮肤知觉障碍或感觉异常的患者。
- 体温超过38度(发热的患者)正在服用药物的患者。
- 皮肤对石墨/石墨等敏感人群血压异常的患者。
- 不能自由表达自己意愿的患者。
- 由于糖尿病等造成高度末梢循环障碍而产生知觉障碍的患者。

**下列情形禁止使用:**

- 急性化脓性炎症患者
- 孕妇、产妇
- 金属内植物患者
- 急性炎症患者
- 凝血功能障碍者
- 有出血倾向的患者
- 有脑血管意外后的痉挛期者
- 有严重认知障碍者

请勿在以下场所使用、存放本产品:

- 阳光直射的场所
- 高温多湿的场所
- 有火的场所
- 灰尘较多的场所
- 烟火附近
- 容易受到震动冲击的场所
- 强电磁场所

04

- 请阅读说明书之后再使用本产品。
- 如果因本产品异常而感觉到身体不适时, 请立即停止使用, 身体或皮肤若有异常的感觉, 请向医生咨询并随动履行。
- 在按摩过程中, 若想将电极片移动或置其他人身上时, 请务必将电源切断后再移动, 否则可能会受到强烈电击。
- 有脑血管意外病史的患者, 不要将电极片置于颈部。
- 请勿带着电子设备进行按摩, 否则可能使电子设备误操作。(如: 电子手表时刻紊乱)。
- 发生不能运转的异常情况时, 请立即切断电源并取下, 否则可能会产生高温或短路, 发生事故, 同时联系客服售后。
- 请勿用湿手插拔USB充电线, 否则可能会导致触电或火灾事故。
- 请勿给儿童或无表达意识能力的人使用, 否则会引起事故或引起身体不适。
- 请勿在浴室等温度高的地方使用, 或者边洗澡边使用产品, 否则可能会受到强烈电击, 并损坏产品。
- 就寝时请勿使用, 否则有可能使本体产生故障, 另外电极片有可能被移到其他部位而产生身体不适。
- 驾驶汽车时请勿使用, 否则可能因刺激过大引起身体不适, 导致事故。
- 请勿将电极片长时间贴在患处, 否则可能会引起皮肤炎症。
- 在按摩时, 请勿使皮带、项链等物品的金属部分接触电极片否则可能会受到强烈电击。
- 使用按摩功能时, 请勿在同一部位长时间(20分钟以上)使用否则可能使按摩部位肌肉疼痛引起身体不适。
- 请正确佩戴本产品, 用于腰部部位, 左右对称佩戴, 否则可能会发生事故或引起身体不适。
- 从产品本体上接下USB充电线时, 请勿拉拽导线, 而应握住导线插头拔出, 否则可能导致触电或损坏产品。
- 产品电极片区域中间具有发热功能。
- 产品长时间工作时, 表面会有发热的现象, 这属于正常现象。


05

- 请确认主机按钮正常工作后方可使用。
- 初次使用时, 请长时间佩戴后电池电量满, 请按照使用说明书进行充电操作, 确保其能正常工作。
- 废弃本产品时, 请依照城市有关环境保护规定进行处理, 否则可能造成环境污染。
- 建议16周岁以上的人群使用。

**产品简介**

产品名称	产品型号	电池容量
腰腹按摩仪	BP-YF07D	2000mAh
工作功率	工作电压	生产地址
8W	3.7V	中国大陆

**显示及功能说明**

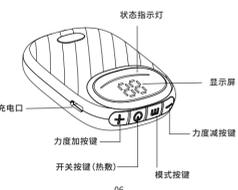

06

**保修条例**

1. 本产品的保修期限按所销售的国家对可能存在不同时长, 我们会在该国法律允许的情况下尽量做延长。
2. 本产品的保修期限为自购买之日起1年。
3. 如果仪器在保修期内出现质量问题, 本品牌将给予免费维修或更换。但由您不正当使用或不规范操作带来的机器损坏不在保修范围内。本品牌将按照成本价格为您更换损坏部件或以旧换新, 旧仪器拥有权归本品牌所有。
4. 请在您需要保修时出示您的购机保修卡。

**以下情况下本品牌可能不提供保修或退换货**

1. 对于火灾、地震、洪水等不可预测事引起的产品损害。
2. 您的过失、误用、其他异常条件下的使用等引起的仪器故障及损坏。
3. 您的自行拆卸及保管不当(如鼠害、液体渗入等)造成的仪器损坏。
4. 在非产品使用环境中强制使用产品造成的损坏, 包括但不限于超出工作负荷等。
5. 其他本品牌无法控制的情况下造成的产品损害。
6. 对于本产品的作用或使用的副作用(如您的事业利益损失、事业的中断, 使用仪器造成的其他损失, 使用本产品需要更换设备、装置或服务所产生的成本, 您的顾客索赔需求等), 本品牌将不承担副作用性损害造成的责任。

对意外事件应承担的种类及程度, 本品牌将按相关的法律法规承担。

07

**合格证**

型号MODEL	
日期DATE	
检查员QC	

**保修卡**

姓名	地址	电话	购买日期	保修年限

本保修卡栏请详细填写。

1. 本产品自购买之日起1年内正常使用状况下免费服务。
2. 超过上项所定期限如需更换零配件, 则酌情收取维修费。
3. 在保修期间, 若有下列情形恕不免费修理:
  - a. 未能出示保修卡或购买凭证(发票或收据)者。
  - b. 超过保修范围的维修。
  - c. 因拆装或改造而造成的损坏。
  - d. 因错误使用或人为使用不当造成的损坏。
  - e. 非一般家庭使用(如长时间使用于环境恶劣的场所)所造成的故障或损害者。
  - f. 外观因使用而自然污旧者。

08

**BP-YF07D**

该产品为EMS类产品, 使用请贴肤使用  
如需使用无法体验到EMS脉冲电流

使用前, 请仔细阅读说明书, 并妥善保管好以供日后使用  
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference

09

09