

# 说明书

颜色：彩色


材质：双胶纸

工艺：16p 骑马钉 单色双面印刷

尺寸：90\*120mm

**BLAUPUNKT**  
合格证  
检验员: QC PASS  
检验日期:

**BLAUPUNKT**  
User Manual  
使用说明书

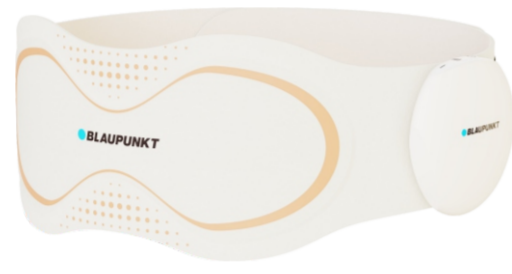

Enjoy it.

制造商: 佛山市蓝宝科技发展有限公司  
Service Hotline: 400 930 6439  
地址: 广东省佛山市顺德区大良街道近社区永福路9号  
Address: No. 9 Fugui Road, Jitang Community, DaLiang Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province  
www.blaupunkt.com.cn

微信扫码, 进入蓝宝小程序

蓝宝按摩仪  
LUMBAR MASSAGER  
BP-YF08

## 目录

1 用户必读	1	7 主要技术参数	10
符号描述	1	8 环保说明	11
禁忌人群	1	9 产品维修服务指南	12
使用注意事项	2	保养及服务	12
保养的注意事项	3	保养案例	12
2 产品功能	3	保养卡	13
3 部件名称	4	10 装箱清单	13
4 使用方法	5		
使用前的注意事项	5		
使用操作	6		
充电方法	7		
指示灯说明	7		
5 保养维护	8		
清洁方式	8		
废弃方式	9		
6 故障诊断	9		

## 1 用户必读

产品使用前请仔细阅读并妥善保管本说明书

### 符号描述

为避免造成人身伤害或财产损失, 请务必遵守以下内容。

用以下图示来分别说明需要遵守的内容

⊘ 表示禁止  
① 表示需要按照图示去做

### 禁忌人群

以下人群/情况应谨慎使用

- 有慢性肾病的人
- 患有心脏病的人
- 皮肤感觉障碍的人
- 腰部有伤未痊愈的人
- 患有骨质疏松的人
- 体温过高(发烧)的人
- 难以失去知觉的人
- 其他在医疗期间接受治疗的人
- 酒精引起有知觉障碍的人
- 怀孕期间或产妇产后不久的人
- 因交通事故等存在腿部后遗症的人

### 使用注意事项

- 避免骨折、扭伤、肌肉痛的人
- 具有发热现象, 对热不敏感的人使用时必须注意
- 因将该产品置于潮湿环境内(入浴、淋浴)材料的人
- 容易对心脏起搏器等电磁敏感型的外植入型电子仪器的人
- 具有急性炎症、癌症、癫痫、中风、高血压等状况的强烈、衰弱的人


### 保养的注意事项

- ① 请穿好该产品的包装袋, 使其远离婴幼儿
- ② 进行清洁时, 请务必从电源插座上拔掉充电器的插头
- ③ 本产品内含有锂电池, 请勿自行拆卸、改装、水浸(产热/短路)或投入火中, 否则可能导致产品损坏
- ④ 请勿拆解或改装, 或用力弯曲、拉扯电源线, 另外请勿在电源线上放置重物或挤压电源线
- ⑤ 请勿存放在儿童和婴幼儿的接触范围之内, 此外, 请勿让他们接触或操作本产品, 否则, 可能会引起伤害、触电或人身伤害

### 2 产品功能

1. 中频EMS脉冲按摩技术, 缓解肌肉疲劳, 缓解酸痛肌肉疼痛;
2. 采用石墨烯材料, 具有热敷功效, 可以缓解、温暖、暖宫;
3. 超轻薄, 隐形便携;
4. 可蓝牙连接, 便捷小程序操作。

### 3 部件名称

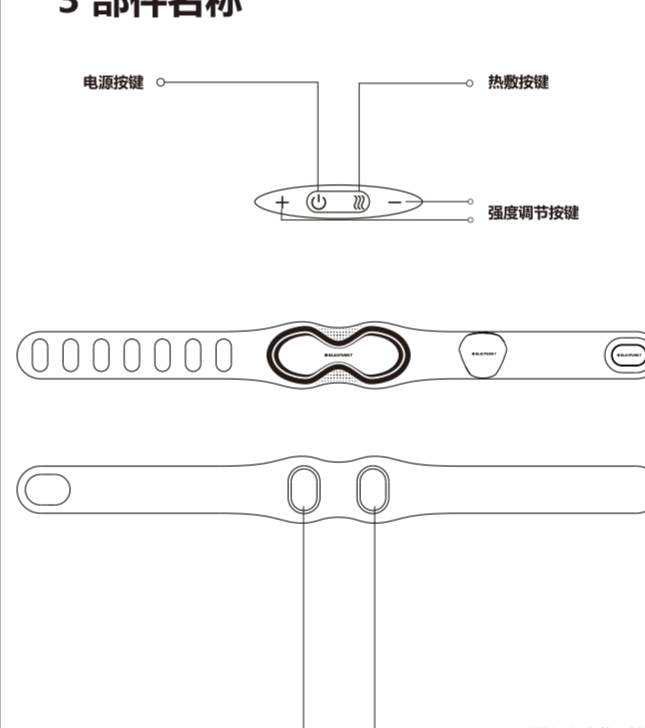

### 4 使用方法

#### 使用前的注意事项

1. 请检查机器及配件完整
2. 使用时请去除挂件和装饰物, 以避免影响按摩部位
3. 将按摩器放在腿上, 通过魔术贴固定好

### 一、使用操作

#### 电源按键

1. 长按3秒电源按键“开机/关机”, 开机后, 默认进入推拿模式①(热+热敷温度40°C)。
2. 短按电源键可依次循环切换模式: 灯光为蓝色, 开机时推拿模式后, 继续短按则为推拿模式—热敷模式—推拿模式—灯光为蓝色—推拿模式, 循环切换, 切换模式时有语音提示

#### 热敷按键

1. 短按热敷键可依次循环切换热敷温度, 开机默认40°C后, 继续短按顺序为40°C—45°C—50°C—0°C, 循环切换, 切换热敷关闭/开启热敷自带语音提示

#### 强度调节按键

1. 开机状态下, 短按强度调节键增加EMS脉冲力度, EMS模式下EMS力量增加, 最高16; EMS模式下, EMS力量为0, 短按强度/关闭/开启EMS自带语音提示

#### 充电方法

1. 将USB充电线插入产品充电孔
2. 在使用过程中产品提示充电提醒, 请暂停使用, 待充满后再使用
3. 支持多种充电方式: USB接口/移动电源/5V=1A 电源适配器

### 5 保养维护

#### 清洁方式

1. 产品使用后, 如有污渍请用干的软布擦拭
2. 如产品特别脏, 可用湿布或酒精棉在机身轻轻擦拭。
3. 不要让水进入产品内部, 请放置自然干燥
4. 请不要在产品上放置重物, 避免产品变形、变污

#### 废弃方式

本产品所用锂离子电池属可回收再生资源, 请在用完废弃之时, 将锂离子电池交给可进行充电式电池回收处理的专门机构进行回收, 电池回收处理:

1. 用螺丝刀沿侧面盖沿将盖面撬开
2. 将电池拆解
3. 将电池的导线剪断, 即可拆解电池

### 7 主要技术参数

产品名称	腰部按摩仪
产品型号	BP-YF08
工作电压	3.7V DC
工作功率	5W
充电电压	5V DC
充电电流	1A
产品尺寸	155*109*21mm
产品重量	133g
电池容量	2000mAh
电源接口	Type-C
生产日期	见产品合格证
执行标准	GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008

### 8 环保说明

1. 本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求;

2. 在环保使用期限内, 消费者在正常使用过程中不会含有害物质泄露、析出等影响消费者健康的问题, 可以放心使用;

3. 本产品环保使用期限为10年, 只有在本说明书所述正常使用条件下使用本产品时, “环保使用期限”才有效。

部件名称	产品中有害物质的名称及含量						
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	其他
塑胶类附件	○	○	○	○	○	○	○
线圈(电子)附件	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○
五金类附件	○	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下

X表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求

(备注: 以上标注“X”的部件中部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限制无法实现替代或减量化)

### 9 产品维修服务指南

#### 保养及服务

为了让您更好的享受蓝宝的各项服务, 请仔细阅读以下内容: 本产品自销售之日起设计保修期“三包”有效期, 在“三包”有效期内, 正常使用下使用本产品发生故障, 可在特授权技术服务维修、更换、退货, 在产品保修期内, 可按照本保修条款的内容, 在蓝宝智能科技授权技术服务中心享受无偿维修服务(属附件: USB线等, 不在保修范围内), 在保修期(含“三包”有效期)内以下情况将实施有偿维修服务, 同时不享受“三包”服务:

1. 不能出示有效保修卡原件和有效发票。
2. 购买产品日期、销售单位名称(盖章有效)等项目未能完整填写或涂改保修卡。
3. 由于不可抗力造成的自然灾害造成的故障、损伤。
4. 在运输、装卸过程中造成的故障、损伤。
5. 由于未能按照《产品使用指南》上所写的正确使用方法和注意事项操作而造成的人为故障。

06. 未经本公司授权对产品进行拆卸、维修、改装而造成故障。

\*需要保修时请携带产品与保修卡(原件)及购买凭证(复印件)一起送往广东蓝宝智能科技授权技术服务中心, 运输费用由用户自理, 如属运输途中产品损坏, 将不能享受国家(三包法)相关的“三包”服务条款。

### 10 装箱清单

接收器	1x
说明书	1x
Type-C 充电线	1x

### 产品保修卡

用户档案: 购买产品时, 请填写此卡, 并妥善保管。

用户名	
通讯地址	
联系电话	
购买地点	
购买日期	
销售编号	
品名及规格	
机身编号	
经销商签名	
用户签名	

\*需要保修时请携带产品与保修卡(原件)及购买凭证(复印件)一起送往广东蓝宝智能科技授权技术服务中心。