

说明书

颜色：彩色


材质：双胶纸

工艺：16p 骑马钉 单色双面印刷

尺寸：90*120mm

BLAUPUNKT
合格证
检验员: QC PASS
检验日期:

BLAUPUNKT
User Manual
使用说明书
腰腹按摩仪

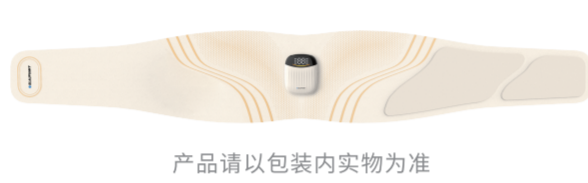

产品请以包装内实物为准

Enjoy it. Enjoy it.

制造商: 佛山市蓝盾科技发展有限公司
Manufacturers: Foshan Lanshun Technology Development Co., Ltd.
服务热线: 4009306619
Service hotline: 4009306619
地址: 广东省佛山市顺德区大良街道逢简社区水藤路8号
Address: No. 8 Hongqian Road, Jiangnan Community, Daling Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province
www.blaupunkt.com

腰腹按摩仪
LUMBAR MASSAGER
BP-YF07A

操作方式

- 穿戴腰带**
请先清洗腰部/腹部,配合保温喷雾或者润肤露,使用效果最佳,切勿穿戴在衣服外面使用。
- 开机、关机**
关机状态下长按2秒开关按键开机/关机,开机默认热敷40°C,红光开启,进入热敷模式,力度1档,状态指示灯亮绿色灯光,显示屏显示40,热敷模式相应灯光会亮起,同时语音播报开机提示“按摩开始”,关机语音播报“关闭按摩”。
- 红光模式**
当机器处于正常工作状态下,连续双击开关按键可关闭/开启红光,并语音播报提示“关闭红光”/“开启红光”。
- 按摩时长**
智能定时20分钟,20分钟循环结束后并关机,并语音提示“关闭按摩”。
- 低电量显示**
当机器处于正常工作状态下电量少于10%时状态指示灯显示红色频闪5秒提示,同时语音播报“电量电量低,请及时充电”并关机。当机器电量少于10%时状态灯开机,指示灯显示红色频闪5秒提示,同时语音播报“电量电量低,请及时充电”并关机。
- 空载状态**
当关闭热敷和关闭EMS按摩状态下,机器默认运行至单次循环结束后自动关机,并语音播报“关闭按摩”。
- 按摩模式调节**
长按模式按键可循环切换按摩模式:热敷模式-拍打模式-揉捏模式-运动模式-推拿模式-放松模式-关闭EMS(模式显示熄灭),调节时对应的模式显示亮白光,并语音播报提示对应按摩模式“拍打模式”、“关闭按摩”。进入EMS按摩模式时,EMS档位为1档。
- EMS档位调节**
当机器处于正常工作状态下并开启EMS按摩,短按“+”号按键可逐级调节EMS力度档位00-11-16,每次操作显示屏亮起所选档位,00-11-16,同时每次操作语音播报对应按摩档位。
- 关机操作**
当机器处于正常工作状态下并开启EMS按摩,短按“-”号按键可逐级调节EMS力度档位,16-19-00,每次操作显示屏亮起所选档位,16-19-00,同时每次操作语音播报对应按摩档位。

01

当机器处于正常工作状态下,档位调节后,EMS电流(当前档位)以每秒1档的能量攀升至所选档位。
当机器进入EMS按摩模式下,按“-”、“+”号按键,无任何反馈。
9. 状态指示灯条(共三种颜色灯光)
40°C: 蓝光灯条常亮。
45°C: 黄光灯条常亮。
50°C: 红灯条常亮。
关闭热敷,灯光条熄灭。
10. 充电状态
充电时状态指示灯呈现绿色呼吸灯状态,直至充满电常亮绿色灯。

本产品有害物质名称及含量标识如下表

部件名称	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板组件※	×	○	○	○	○	○
金属件	×	○	○	○	○	○
布套	○	○	○	○	○	○

※: 电路板组件包括印刷电路板机器构成的零部件如电阻电容、集成电路、连接器等。○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

环保使用期限说明

此电子电器产品在说明书所述的使用条件下使用本产品,含有的有害物质或元素不致发生外泄,不致对环境造成污染或对人体、财产造成严重损害的期限为10年。

02

电池废弃要求

在废弃本产品前,应法规要求,须将电池取出。
在取出电池时,产品必须断电。
电池应按法律法规,安全处置。

非专业人员请勿自行拆卸。

注意事项

请绝对不要与以下家用电器一起使用,避免产生影响而受到伤害:

- 心脏起搏器等体内植入型医用电子设备。
- 心电图仪等医用电子设备。
- 加油站、面粉生产车间、煤气站等易燃易爆场所禁用。
- 人工心肺等维持生命用电子设备。

警告

如果患者在身上同时使用高频手术设备和按摩仪时,在按摩仪电极片位置可能引起烧伤,也可能损坏按摩仪。
如果在短波或微波治疗设备附近(1米)使用本产品时,本按摩仪的输出可能不稳定。

按摩中,电极片应避免接触伤口及瘢痕。
按摩时,电极片不可置于胸部心脏附近,否则会增加心脏纤维颤动的危险。
产品建议一个用户使用,交叉用户使用,请清洗产品上的电极片后使用。
使用产品时应将电极片紧密的贴合在皮肤上,均匀接触。
本产品电极片具有发热功能,开启加热功能时,同一部位长时间(超过20分钟)使用使用功能时可能导致低温烫伤。
使用中或使用后出现身体不适,建议停止使用,并咨询医生。
本产品含有锂电池,请勿自行拆卸、改装、水浸产品或投入火中,否则可能导致产品损坏爆炸。

03

请勿在心脏附近、颈部上方、头部、口腔、阴部或皮肤疾患等部位使用且不能同时按摩双膝脚底。

- 另外,使用时不要压迫内脏,否则可能会发生事故或引起身体不适。
- 请勿与其他医疗器械或2台以上本产品一起使用,否则可能会引起恶性事故或身体不适。
- 请勿用于使用说明书中所记载的按摩以外的目的,否则可能会发生事故,产生故障。
- 请勿使用表面有缺口、损坏的电极片,否则可能会发生事故产生故障。
- 请勿擅自拆卸、修理和改造本产品,否则可能会导致故障或触电事故。
- 由于糖尿病等造成高度末梢循环障碍而产生知觉障碍的患者。

下列情形,请向医生咨询后使用。否则可能会发生事故或引起身体不适

- 正在接受医生治疗,并感觉身体异常的患者。
- 感染性疾病的患者。
- 心脏、脑神经异常的患者。
- 皮肤知觉障碍或皮肤异常的患者。
- 体温超过38度(发热的患者)正在服用药物的患者。
- 皮肤对电流痛/位置等敏感人群血压异常的患者。
- 不能自由表达自己意愿的患者。
- 由于糖尿病等造成高度末梢循环障碍而产生知觉障碍的患者。

下列情形禁止使用

- 急性化脓性炎症患者。
- 孕妇、产妇。
- 金属内植入物患者。
- 近期起搏器使用者。
- 痉挛性麻痹者。
- 凝血功能障碍者。
- 有出血倾向的患者。
- 有脑血管意外的后期者。
- 有严重认知障碍者。

请勿在以下场所使用,存放本产品

- 阳光直射的场所。 灰尘较多的场所/烟火附近。
- 高温多湿的场所。 容易受到振动冲击的场所。
- 有水的场所。 强电磁场所。

04

请阅读完说明书之后再使用本产品。

- 如果因本产品异常而感觉到身体不适时,请立即停止使用。身体或皮肤若有异样的感觉,应向医生咨询并遵医嘱行事。
- 在按摩过程中,若想将电极片移动位置或其他人身上时,请务必将电源切断后再移动,否则可能会受到强烈电流。
- 有心血管疾病的患者,不要将电极片置于颈部。
- 请勿带着电子设备进行按摩,否则可能使电子设备误操作(如:电子手表时刻紊乱)。
- 发生不能运转的异常情况时,请立即切断电源并取下,否则可能会产生高温或短路,发生火灾,请及时联系客服售后咨询。
- 请勿用湿手插拔USB充电线,否则可能会导致触电或发生事故。
- 请勿给儿童或无表达能力的人使用,否则可能会引发事故或引起身体不适。
- 请勿在浴室等湿度高的地方使用,或者边洗澡边使用产品,否则可能会受到强烈电击,并损坏产品。
- 就寝时请勿使用,否则有可能使本产品发生短路,另外电极片有可能被移到其他部位而产生身体不适。
- 驾驶汽车时请勿使用,否则可能因刺激过大引起身体不适,导致事故。
- 请勿将电极片长时间贴在患处,否则可能会引起皮炎。
- 在按摩时,请勿使皮带、项链等物品的金属部分接触电极片否则可能会受到强烈电击。
- 使用按摩功能时,请勿在同一部位长时间(20分钟以上)使用否则可能使按摩部位肌肉疲劳引起身体不适。
- 请正确佩戴本产品,用于腰部部位,左右对称佩戴,否则可能会发生事故或引起身体不适。
- 从本产品上拔下USB充电线时,请勿拉扯导线,而应握住导线插头拔出,否则可能导致触电损坏产品。
- 产品电极片具有表面发热功能,对热不敏感的人使用时必须注意。
- 产品长时间工作时,表面会有发热的现象,这属于正常现象。
- 请确认主机按正常程序后方可使用。
- 初次使用时,或产品长时间闲置后电池电量耗损,请按照使用说明书进行充电操作,确保其能正常工作。
- 废弃本产品时,请依照城市有关环境保护规定进行处理,否则可能会造成环境污染。
- 建议16周岁以上的人群使用。


05

产品简介

产品名称	产品型号	电池容量
腰腹按摩仪	BP-YF07A	2000mAh
工作功率	工作电压	生产地址
8W	3.7V	中国大陆

注:本产品为可充电产品,适配Type-C接口充电。

显示及功能说明

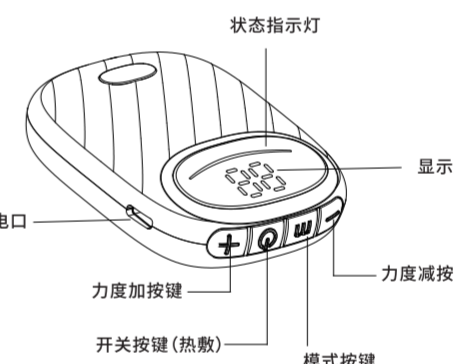

06

保修条例

- 本产品的保修期限按所销售的国家对可能存在不同时长,我们会在该国法律允许的情况下尽量做延长。
- 本产品的保修期限为自购买之日起1年。
- 如果仪器在保修期内出现质量问题,本品牌将给予免费维修或更换。但由您不正当使用或者不规范操作带来的机器损坏不在保修范围内。本品牌将按照成本价格为您更换损坏部件或以旧换新,旧仪器拥有权归本品牌所有。
- 请您在需要保修时出示您的购机保修卡。

以下情况下本品可能不提供保修或退换货

- 对于火灾、地震、洪水等不可预测事引起的产品损害。
- 您的过失、误用、其他异常条件下使用等引起的仪器故障及损坏。
- 您的自行拆卸及保管不当(如鼠害、液体渗入等)造成的仪器损害。
- 在非产品使用环境中强制使用产品造成的损坏,包括但不限于超出工作负荷等。
- 其他本品牌无法控制的情况下造成的产品损害。
- 对于本产品的作用或使用的随机性损害(如您的商业利益损失,事业的中断,使用仪器造成的其他损失,使用本产品需要更换设备、装置或服务所产生的成本,您的顾客索赔需求等),本品牌将不承担随机性损害造成的责任。

对意外事件应承担的种类及程度,本品牌将按相关的法律法规承担。

07

合格证

型号MODEL	日期DATE	检查员QC

保修卡

姓名	地址	电话	购买日期	保修年限

本保修卡各栏请详细填写。

- 本产品自购买日起,内在正常使用状况下免费服务。
- 超过上项所定期限如需更换零件,则酌情收取检修费。
- 在保修期间,若有下列情形恕不免费修理:
 - 未能出示保修卡或购买凭证(发票或收据)者。
 - 超过保修范围的维修。
 - 因拆装或改造而造成的损坏。
 - 因错误使用或人为使用不当造成的损坏。
 - 非一家庭使用(如长时间使用于环境恶劣的场所所造成的故障或损害者)。
 - 外观因使用而自然污旧者。

08

BP-YF07A

该产品为EMS类产品,使用请贴肤使用
如内衣使用将无法检测到EMS脉冲微电流

使用产品前,请仔细阅读说明书,并妥善保管好以供日后使用
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference

09

10