

说明书

颜色：彩色

材质：双胶纸

工艺：16p 骑马钉 单色双面印刷

尺寸：90*120mm

BLAUPUNKT
合格证
检验员: QC PASS
检验日期:

BLAUPUNKT
User Manual
使用说明书
按摩脚垫 (美腿仪)



产品请以包装内实物为准

Enjoy it.

制造商: 佛山市蓝建科技发展有限公司
Manufacturer: Foshan Lanjian Technology Development Co., Ltd.
服务热线: 4009306619
Service Hotline: 4009306619
地址: 广东省佛山市顺德区大奇街道逢源社区永联路8号
Address: No. 8 Yonglian Road, Jiling Community, Daling Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province
本产品由佛山市蓝建科技发展有限公司负责生产和销售。
This product is produced and sold by Foshan Lanjian Technology Development Co., Ltd.
更多产品信息请访问 www.blaupunkt.com

按摩脚垫 (美腿仪)
FOOT MASSAGER
BP-ZD01A

目录

1 用户必读	1	7 主要技术参数	7
符号描述	1	8 环保说明	8
禁忌人群	1	9 产品保修服务指南	8
使用注意事项	2	保修及服务	8
保养的注意事项	2	保修条件	9
2 产品功能	2	保修卡	10
3 部件名称	3	10 装箱清单	10
4 使用方法	4		
使用前的准备事项	4		
使用操作	4		
充电方法	4		
指示灯说明	5		
5 维护保养	5		
清洁方式	5		
清洁方式	6		
6 故障诊断	6		

1. 用户必读

产品使用前请仔细阅读并妥善保管本说明书。

符号描述

为减少造成人身伤害或财产损失, 请务必遵守以下内容。

· 以下图示来分别说明需遵守的内容

⊘ 表示禁止 ⊕ 表示需根据指示去做

禁忌人群

以下人群/情况应谨慎使用。

- 脚部有皮肤感染的人。
- 身体感觉异常的人。
- 皮肤感觉异常的人。
- 脚部有伤未痊愈的人。
- 体温38°C(度)以上的人。
- 被认定失去温度感觉的人。
- 其他在医疗机构治疗的人。
- 糖尿病引起有知觉障碍的人。
- 怀孕期或正在怀孕的人。
- 因手术或整形手术而在体内植入金属、硅或塑料材料的人。
- 容易受到心脏起搏器等电磁影响的体内植入型电子仪器的人。
- 具有急性炎症、敏感、过敏、血压异常或症状的强烈、衰弱的人。

01

使用注意事项

1. 请勿在潮湿环境下使用本产品。
2. 请在5-40°C环境下使用本产品。
3. 如果感觉脚部酸痛, 请立即停止使用本产品。
4. 每次使用时间20分钟, 请检查自己的脚部状况, 然后适当调整使用次数。
5. 如果在使用过程中皮肤或脚部出现任何问题, 请立即停止使用本产品并向医生咨询。
6. 使用过程中, 感觉头晕、呕吐、悸动等身体异常反应的时候, 请立即停止使用本产品并向医生咨询。
7. 禁止给本产品带来巨大的冲击和负重。
8. 禁止在浴室或淋浴间内使用本产品。
9. 禁止私自拆卸产品, 改造或自行修理产品。
10. 禁止使用非指定电压供电, 容易导致产品电路受损。

保养的注意事项


1. 请勿将本产品放入洗衣机或烘干机清洗。
2. 进行清洗时, 请务必从家用电源插座上拔掉电源的插头。
3. 请勿自行拆卸、改装、水浸产品(控制)或拆解外壳, 否则可能导致产品损坏从而无使用。
4. 请勿将本产品浸入水中, 或用力弯曲、拉扯电源线, 另外请勿在电源线上堆放重物或挤压电源线。
5. 请勿存放在儿童和宠物可以接触到的地方。此外, 请勿让他们接触或操作本产品。否则, 可能会引起灼伤、触电或人身伤害。

2. 产品功能

采用EMS脉冲按摩手法, 配有科学设计的按摩曲线, 舒缓肌肉酸痛; 热敷功能通过均匀分布热量, 温暖足部, 促进血液循环。

02

3. 部件名称

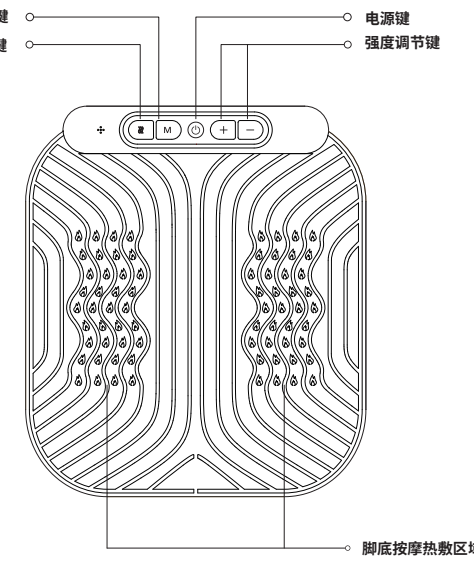

模式键
电源键
声音/热敷键
温度调节键

脚踏按摩热敷区域

4. 使用方法

使用注意事项

1. 从包装中取出产品, 放在平坦的地方。
2. 脚部放在产品上合适位置再使用。
3. 为了使用产品工作时EMS脉冲更明显请保持足底保持湿润, 或用温中温布擦拭产品按摩区域表面。

一、使用操作

电源键

1. 长按电源键开机/关机, 蓝灯亮/灭, 语音播报“开启按摩”/“关闭按摩”。

模式键

1. 短按模式键可依次循环切换模式。开机默认推拿模式, 继续切换顺序为刮痧模式→拔罐模式→火罐模式→针灸模式→推拿模式。循环切换。切换模式自语音提示。

声音/热敷键

1. 短按声音/热敷键可依次循环切换热敷档位。切换顺序为低档→中档→高档→关闭热敷, 循环切换。切换模式自语音提示。
2. 长按声音/热敷键可开/关语音, 语音播报“开启语音”/“关闭语音”。

温度调节键

1. 开机状态下, 短按“+”、“-”键调节EMS强度, 共0-14档力度可调, 每次切换会有对应档位的语音播报。

二、充电方法

1. 将USB充电线插入产品充电孔。
2. 在使用过程产品提示低电量报警时, 请及时充电, 待充电后再使用。
3. 支持多种充电方式: 电脑USB接口/移动电源/5V=1A电源适配器。

04

废弃方式

本产品所用的锂离子电池是可回收的再生资源, 请在用完废弃之时, 将锂离子电池取出, 交给可进行充电电池回收处理的专门机构进行处理, 电池回收步骤:

1. 用螺丝刀沿盖边缘将盖撬开。
2. 将电池的导线剪断, 即可拆下电池。
3. 用户可自行更换电池。
4. 废弃时, 必须将电池从器具中取出。
5. 在取出电池时, 请务必小心。
6. 电池应妥善处理。

6. 故障诊断

本手册列出了关于本产品最常见的问题, 如果您无法在其中找到您所遇问题的答案, 请联系服务热线或您所在地区的授权服务中心。

问题描述	可能原因	解决方法
无法启动	产品仍连接在电源插座上 电池电量耗尽	请断开电源线 请充电
无法充电	设定时间 插头未插好	重新设定时间 重新插好插头
机身不加热	没有使用指定电压 在推荐的环境温度范围之外使用时, 本产品可能无法正常运行	更换成产品指定的充电器 在推荐的5-40°C的使用温度范围内使用

7. 主要技术参数

产品名称	按摩脚垫 (美腿仪)
产品型号	BP-ZD01A
充电电压	5V =
充电电流	1A
工作电压	3.7V =
工作功率	7W
电池容量	2000mAh
产品尺寸	315*361*21mm
产品净重	210g
包装尺寸	330*65*50mm
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

07

8. 环保说明

1. 本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求;
2. 在环保使用期限内, 消费者在正常使用过程中不会出现有害物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题, 可以放心使用;
3. 本产品环保使用期限为10年, 只有在说明书所述的正常条件下使用本产品时, “环保使用期限”才有效。

部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶类零件	○	○	○	○	○	○
线路板 (电子) 组件	○	○	○	○	○	○
紧固件	○	○	○	○	○	○
五金类零件	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T26572规定的限量要求
(备注: 以上标“X”的部件中部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限制无法实现替代或减量)

9. 产品保修服务指南

保修及服务

此产品是一件设计精良, 用高品质元件制造之家用电器, 在正常使用及保养下应能发挥其优越性能。在购买日期后1年内, 若发生任何因制造工艺或元器件造成之损坏, 维修服务中心将为持证用户提供免费上门服务, 视情况更换零件或整个产品。

08

保修卡

姓名		保修年限
地址		
电话		
购买日期		

本保修卡各栏请填写。
1. 本产品自购买日起1年内正常使用情况下免费服务。
2. 超过上项所定期限如需更换零件, 酌收材料费。
3. 在保修期间, 若有以下类情形恕不免费修理:
a. 未能出示保修卡或购买凭证(发票或收据)者;
b. 超过保修范围的维修;
c. 因拆装或改造而造成之损坏。
d. 因错误使用或人为使用不当造成的损坏。
e. 非一般家庭使用(如长时间使用于环境恶劣的场所)所造成之故障或损害者。
f. 外观因使用而自然污损者。

检验员

经销商盖章

10. 装箱清单

主机	1x
说明书	1x
Type-C 充电线	1x

10

BP-ZD01A

使用产品前, 请仔细阅读说明书, 并妥善保管好以备日后使用
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

09