



User Manual

使用说明书



请以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

制造商: 奥弗锐(福建)电子科技有限公司

Manufacturer: Ofree (Fujian) Electronics Technology Co., Ltd.

服务热线: 4000007655

Service Hotline: 4000007655

地址: 福建省宁德市东侨经济开发区疏港路9号

Address: 9 Shugang Road, Dongqiao Economic & Technological Development Zone, Ningde City, Fujian Province

本产品由奥弗锐(福建)电子科技有限公司负责生产和销售。

此外所有的产品、服务、公司、商标、商品名称和标志均属于其各自所有者的财产——更多信息请访问www.blaupunkt.com

BP-AMY014
MASSAGE CHAIR
按摩椅

目录

产品特点-----	01
安全注意事项-----	02
产品各部门名称-----	04
移动及安装-----	05
小腿连接方法-----	06
遥控器操作说明-----	07
产品参数-----	13
Robocare·医疗保健·部位集中·日常护理-----	14
故障排除-----	15
电气原理图-----	16
保修卡-----	17

产品特点



XD按摩




6个按摩球



左右独立按摩



健康护理

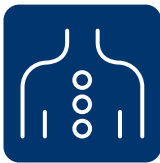

局部集中



日常护理



专属按摩




失重体验



足底滚轮



手部按摩

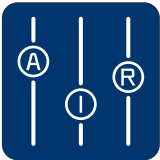

局部气囊调节



2个安全传感器



智能屏遥控器



恒温加热



蓝牙音箱

XD按摩模块

它控制按摩球的水平和垂直运动，并根据个人体型和角度提供最优化的量身定制按摩

按部位调节按摩

可根据不同部位轻松调节按摩速度和按摩强度。

安全强化

按摩椅应用了2个安全传感器加强使用者的安全

安全注意事项

请仔细阅读使用说明以确保正确安装和使用。

请勿由用户任意安装或维修产品。

如果因用户随意安装或维修而损坏产品，我们不承担任何责任。



仅限室内使用

请勿在家中以外的地方安装。

本产品是为用户在家中使用而生产的。在商业和公共设施中使用时，免费售后时长缩短。

请注意不要让婴儿或宠物接触产品。

请特别注意不要进入椅子下面或后部、扶手等部位。



注意事项

01. 安装使用时避免放在浴室等潮湿的环境，可能会有触电的风险。
02. 请避开灰尘多或易生锈的地方安装和使用。
03. 请勿在室内温度超过40摄氏度的地方使用。
04. 不要在室外安装。
05. 请不要在暖气装置附近或热源发生装置等附近使用。
06. 请在平整、稳定的地方安装使用。
07. 请在安装在通风良好的地方。
08. 请勿随意分解产品使用，可能导致故障。
09. 请勿与其他电器或医疗产品同时混合使用。
10. 请不要在产品上倒入或喷洒异物，可能导致故障。
11. 请不要将重量过重的产品放在本产品上。
12. 请注意不要让婴儿或宠物进入椅子下面或后部扶手等。

禁用产品的患者和需要处方的用户

以下患者不要使用本产品：

01. 血栓(thrombosis)，血塞(Blood plug)，严重的静脉曲张，急性静脉曲张等被医生诊断为不适宜使用的人。
02. 怀孕初期(第1孕期，最初3个月)。
03. 有严重心脏，肾脏和肝脏疾病的人。
04. 眩晕症或无法控制的脑炎患者。
05. 因重症糖尿病等而有高度末梢循环障碍，被认定有温度感丧失的人。
06. 有躁狂症或其他精神疾病的人。
07. 骨折诊断后治疗的重症监护人。
08. 身体和精神上难以独立完成日常生活动作的人。

以下人群一定要咨询医生后使用：

01. 怀孕初期除外，因使用本产品而担心副作用的孕妇。
02. 由于急性炎症症状和不适等导致体温高于正常体温者。
03. 有急性皮肤病、恶性肿瘤、其他皮肤病(皮肤病)等患者。
04. 高龄体重下降或其他疾病而肌肉减弱的人或消瘦者。
05. 正在接受医生治疗，需要静养的人。
06. 被诊断为急性椎间盘和颈椎扭伤的患者。
07. 有严重骨质疏松症的人。
08. 使用移植型心跳起搏器等人体移植型电子医疗设备的人。
09. 意识表达和肢体动作不协调的人。
10. 有急性精神病症状或正在接受治疗的人。
11. 其他身体异常的人

使用加热功能时注意事项

01. 长期使用，皮肤可能有低温灼伤等危险，请勿连续使用。
02. 请不要让皮肤接触加热部位。
03. 不要在开启加热功能的情况下睡觉。
04. 皮肤脆弱的儿童，老人或患者需要监护人的保护，请更加谨慎使用。

使用前注意事项

01. 如有禁止使用本产品之类疾病，担心使用该产品会产生副作用，请与医生确认。
02. 确认产品的操作方法和可能发生的副作用。
03. 使用产品前请确保婴儿或宠物不接近。
04. 为了安全使用产品，从低强度按摩开始。
05. 使用产品前确认“电源”按钮的位置。
06. 查看产品使用时间。
07. 产品外壳被撕裂或脱落时，衣服或头发会被卷入，造成严重事故，因此要检查产品的外观是否有常。
08. 不要用湿手插拔电源线。
09. 不要在用户身体湿润的情况下使用产品。
10. 在使用产品之前检查产品的电源状态。


使用时注意事项

01. 如发现身体有刺激性疼痛或异常，应立即停止使用并咨询医生。
02. 产品的加热部分和电机驱动部分不要直接接触皮肤。
03. 遵守产品的一次使用时间(最多30分钟)。
04. 产品使用时，不要与其他振动器或加热垫混合使用。
05. 将产品的遥控器始终放在易于操作的地方。
06. 同一产品不得超过2人同时使用。
07. 避免产品按摩部位的饰品(头饰，项链，手表，手镯，戒指等)造成伤害。
08. 产品按指定用途及部位使用。
09. 不要冲击固定遥控的支架。
10. 使用产品时注意不要夹住身体的任何部位。
11. 使用产品时，请注意不要让婴儿或宠物接近按摩椅。
12. 手机或财物可能会掉进按摩椅缝隙中。
13. 使用产品时如果睡着了，要注意体温过低。
14. 产品角度完全恢复后再离开按摩椅。
15. 从产品上下来时踩着脚部按摩器下来会引起噪音，请注意。
16. 使用蓝牙音响时，如果长时间使用音量过大，可能会导致听力受损，请注意。

使用产品时可能发生的副作用

- 01. 产品造成的划伤、跌伤、烫伤等。
- 02. 产品过度使用和压力导致的肌肉和韧带损伤等。
- 03. 过敏症状和烧伤等。
- 04. 老年性脊柱骨折及腰椎等。


产品各部分名称

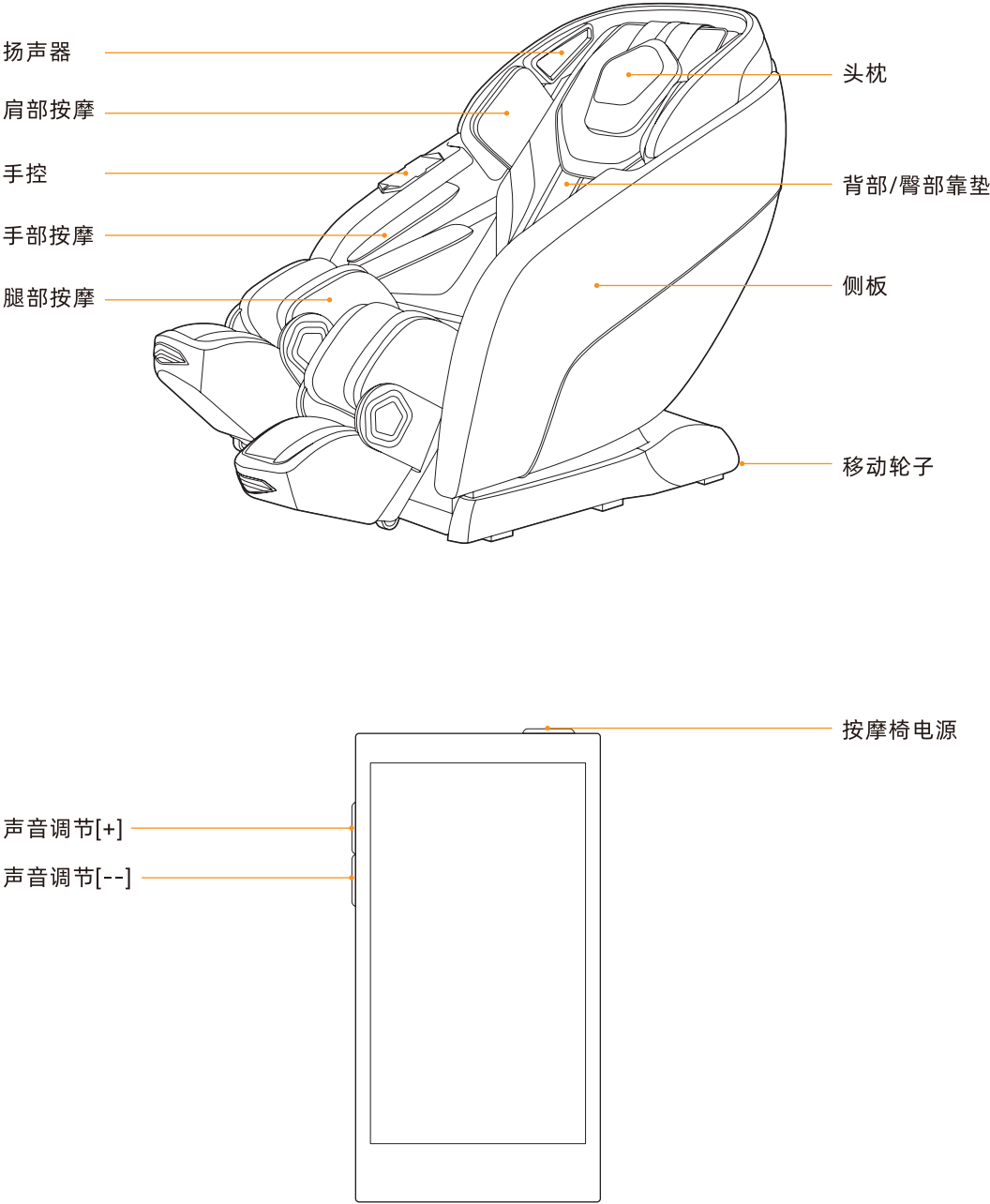

移动及安装

移动方法以及安装空间

- 在安装产品之前，确保有足够的空间。
- 确保产品周围没有障碍物或附件。
- 将产品向后躺，以方便移动角度的移动，然后移动到您想要的地方。
- 请确保头部预留安全距离30cm，腿预留安全距离60cm。
- 安装时请注意不要在产品下面铺设电缆线。
- * 由于产品重量，地板可能会有划痕，请注意。
- * 移动产品时，请2人以上一起移动。

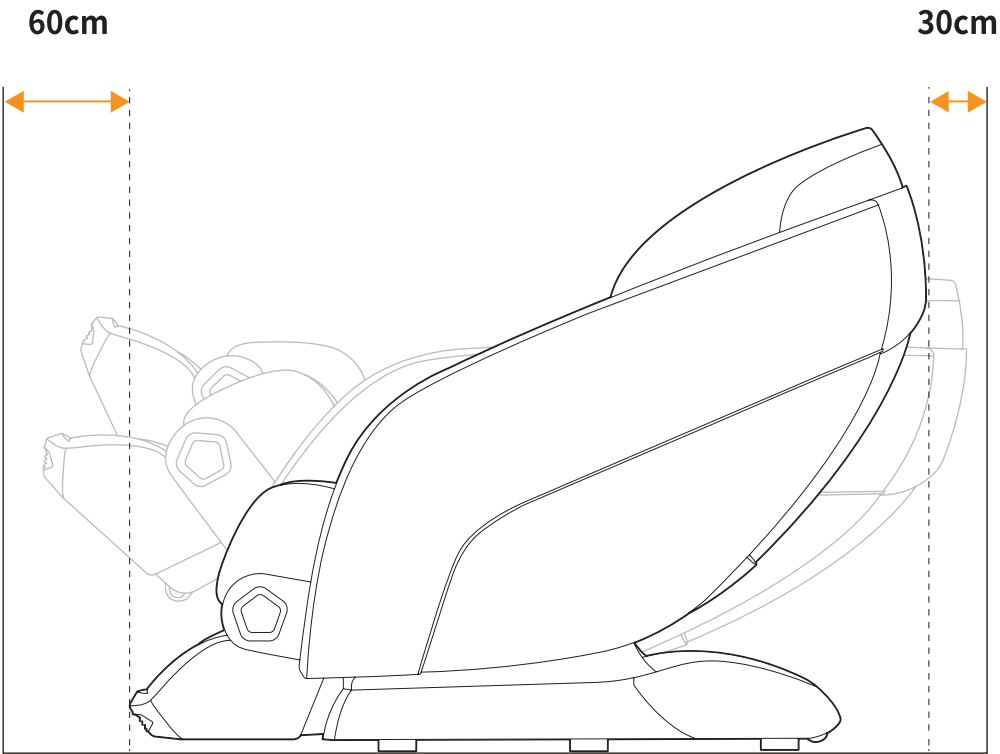

小腿连接方法

安装腿部轴套。



拆卸主机上小腿对应位置的螺丝，挂上小腿（分左右腿）在进行固定。整理好皮套。



抬起小腿，连接气管与小腿电源。



遥控器操作说明

注册个人资料


[电源按钮] > 注册个人资料 > 选择个人资料图片 > 注册
※ 使用注册的账户运行按摩程序时，体型检测和肩部位置调整在第一次进行后自动保存，以后不会进行。另外，根据程序设定的“背/腿角度，腿长，按摩速度，滚动速度，按摩强度，XD强度”将自动保存。(部分程序除外)

※作为游客开始使用时，部分服务可能会受到限制。



开始

首页 > 模式选择 > 测量体型及调整肩部位置 > 开始按摩

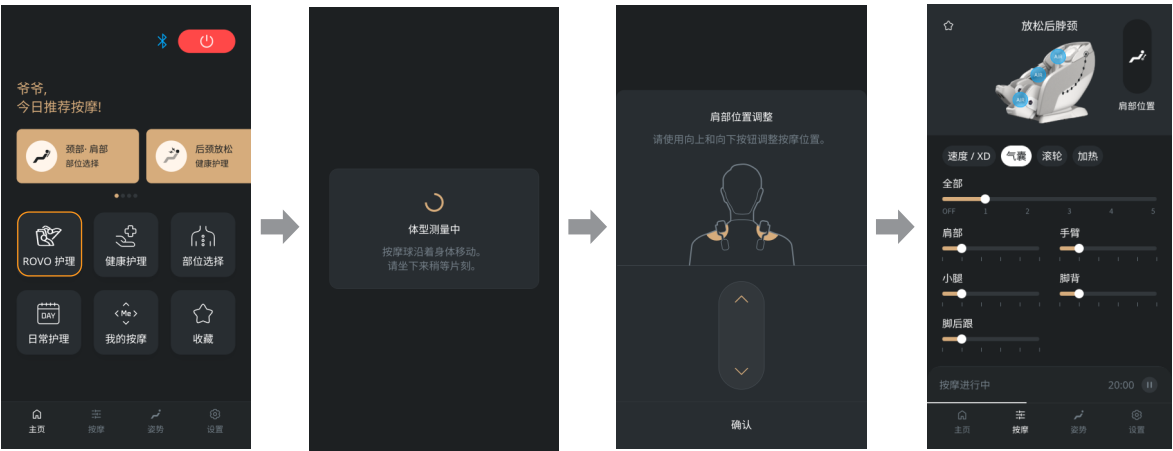

遥控器操作说明

结束

[电源按钮]>确认提示画面后选择“确认”>结束按摩



当前按摩

当前正在执行的按摩画面上的按摩时间，按摩速度，XD,气囊，滚轮，加热等可以详细设置强弱。



按摩椅姿势



可以手动调节按摩椅的[全身角度、靠背角度，零重力，腿部角度，腿部长度]。
※ 部分自动程序无法手动调节。



物体检测指南

物体检测指南画面>物体移除后确认>重新开始按摩

※即使移除物体后仍持续被检测到，再次确认设备周围后，按照说明画面长按【强制复位】，返回。

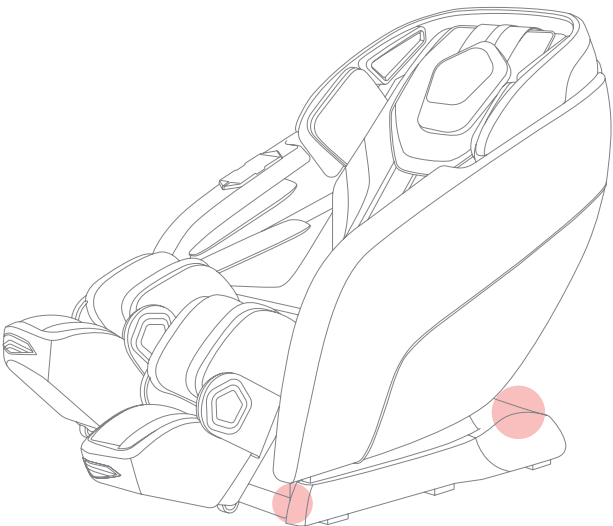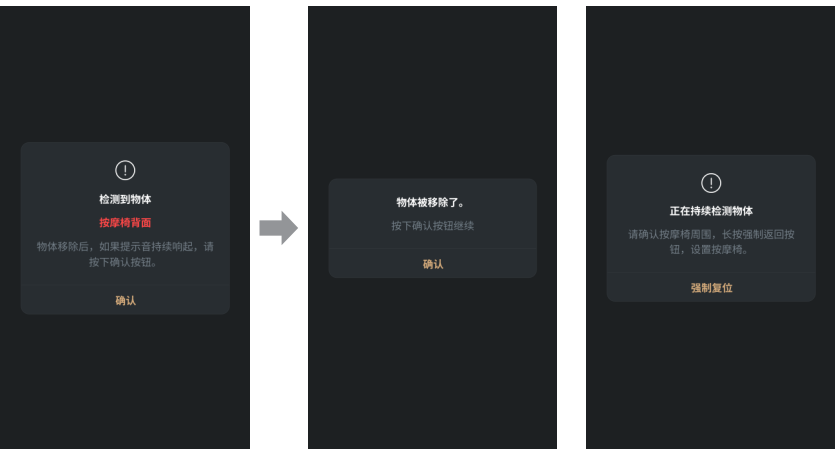

*产品的前部和背面有2个安全传感器。

Robo护理

首页 > Robo护理 > 按摩选择 > 选择按摩模式开始按摩。



健康护理

首页 > 健康护理 > 按摩选择 > 选择按摩模式开始按摩。

我的按摩

我的按摩 > 选择按摩部位 > 选择按摩方式 > 开始按摩
※当前按摩画面中可以进行按摩球左右间距等详细设置。
我的按摩-按摩部位·直接选择”时，按摩球可以上下移动，按摩部位-腰部·臀部，脚·腿，直接选择，无需测量体型，按摩立即开始。



局部集中

首页 > 部位选择 > 按摩选择 > 选择按摩模式开始按摩

日常护理

首页 > 日常护理 > 按摩选择 > 选择按摩模式开始按摩



收藏夹

- 01. 保存: 主页 > 收藏 > 收藏夹 > 点击星星图标以保存为收藏夹。
- 02. 执行: 主页 > 收藏夹 > 选择已保存的模式 > 开始按摩
- 03. 列表管理: 收藏夹最多可以保存12个，保存的模式可以选择移除。



个人资料管理

主页 > 设置 > 个人资料管理 > 删除和添加个人资料。



蓝牙

主页>设置>蓝牙开/关
※ 名称: KARYX ROVO-#### · 密码: 9999
产品的唯一蓝牙编号。一个空间内有多个单元
如果您有按摩椅，请在连接前检查唯一编号。



画面声音

首页>设置>画面设置>屏幕亮度·屏幕自动关闭·音量·按钮音



按摩时间

主页 > 设置 > 按摩时间 > 10-20-30分钟



退出后设置

首页>设置>关闭后设置>姿势保持ON/OFF·按摩球位置·按摩球左右间距·XD强度设置
※ 部分自动程序无法设置保持姿势



按摩椅信息

主页 > 设置 > 按摩椅信息



产品参数

产品名称：按摩椅
产品型号：BP-AMY014
额定电压：220V~
额定频率：50 Hz
额定功率：150W
自动定时器：10 分钟、20分钟、 30分钟
气囊范围：肩部、手臂、小腿、脚踝、脚后跟
滚轮：脚底

按摩球范围：颈部、臀部
遥控器：5英寸LCD·分辨率:480X854
扬声器：立体声扬声器2声道,10 瓦
产品重量：105Kg
产品尺寸：158*78*118cm
平躺尺寸：180*78*88cm

医疗保健·部位集中·日常护理

首页 > 机器人护理 > 模式选择 > 体型测量及肩部位置调整 > 开始按摩

髂腰肌放松 -- 这是一种静态拉伸动作，有助于放松连接骨盆和下半身的核心肌肉

骑行 -- 通过骑自行车的动作，放松膝盖和关节周围的肌肉，帮助下肢灵活的按摩。

下肢伸展 -- 这是放松腰部的肌肉，以下半身为主的伸展按摩。

梨状肌放松 -- 这是放松臀部后侧肌肉，帮助柔韧性的按摩。

机器人活力 -- 爬楼梯的腿部运动动作和背部按摩同时进行，为全身注入活力。

机器人恢复 -- 轻柔地按摩全身，帮助腿部灵活。

健康护理

首页 > 保健 > 模式选择 > 体型测量及肩部位置调整 > 开始按摩

后颈放松 -- 这是对颈部、肩部部位进行柔软按摩和拉伸的放松按摩。

舒缓腰部 -- 按摩腰部和周围，帮助肌肉放松。

全身放松 -- 通过多种模式按摩全身。

臀部抬高 -- 这是一个刺激臀部和骨盆肌肉的按摩程序，自然诱导深蹲。

水肿缓解 -- 这是利用全身气囊帮助缓解肿胀的按摩。

解腿部浮肿 -- 利用小腿气囊和足底滚轮进行循环按摩，有助于缓解腿部浮肿。

部位集中

首页 > 部位集中 > 模式选择 > 体型测量及肩部位置调整按摩开始

颈部·肩部 -- 这是对颈部、肩部的按摩，通过按摩放松肌肉和穴位。

背部·腰部 -- 这是通过按摩背部、腰部周围部位来放松肌肉和指压的按摩。

腰部·臀部 -- 对腰部、臀部周围进行复合按摩，放松身体。

脚部·腿部 -- 对脚部和腿部部位进行各种按摩。

日常护理

首页 > 日常护理 > 模式选择 > 体型测量及肩部位置调整 > 开始按摩

深度睡眠 -- 这是对颈部、肩部的按摩，通过按摩放松肌肉和穴位。

运动前后 -- 这是通过按摩背部、腰部周围部位来放松肌肉和指压的按摩。

晨间活力 -- 对腰部、臀部周围进行复合按摩，放松身体。

餐后肠道健康 -- 对脚部和腿部部位进行各种按摩。


育儿后的放松 -- 集中因育儿而疲惫的颈部和腰部按摩，并提供手臂和腿部的气囊按摩。

故障排除

如果产品出现异常，请在委托服务中心之前先确认以下事项。

状况	原因	解决办法
即使打开了主电源也无法工作	遥控器电源按钮未执行	按下遥控器电源按钮
	未选择程序	请选择程序并运行程序
	电源插头接触不良	请将电源插头正确插入插座
	电源插头、电源线损坏	请联系售后中心
	保险丝熔断	
	电子电路异常	
操作中噪音发生的情况	一般机械音产生 -空气泵振动音，空气吸入/排出音 -气囊膨胀引起的注塑噪音 -电磁阀开闭音 -座椅摩擦音	产品正常工作的声音不是故障
	长时间使用的情况下	请重新启动(30分钟后)
	长时间使用导致的磨损	请联系售后服务中心
操作中动作突然停止时	突然断电	请重新启动电源
	运行时间结束	请重新启动(30分钟后)
角度变化中然停止时	传感器及障碍物确认	清除障碍物并重新启动
	过度使用，过度的冲击	请重新启动(30分钟后)
按摩球在操作中卡在 内衬布上或弹出时	按摩球和座垫的摩擦	这是按摩球在按摩时产生的正常现象，不是故障。
无法返回原位置	在结束过程中按下遥控器按钮的情况	请重新启动电源
	过度操作的情况	请联系售后服务中心
遥控器过热	长时间使用	重新开始(30分钟后)
电源线过热	过度负荷	重新开始(30分钟后)
	其他异常原因	请联系售后服务中心
如果气囊无法工作	气囊连接软管脱落的情况	请联系售后服务中心
	与气囊相关电源线断开	

电气原理图

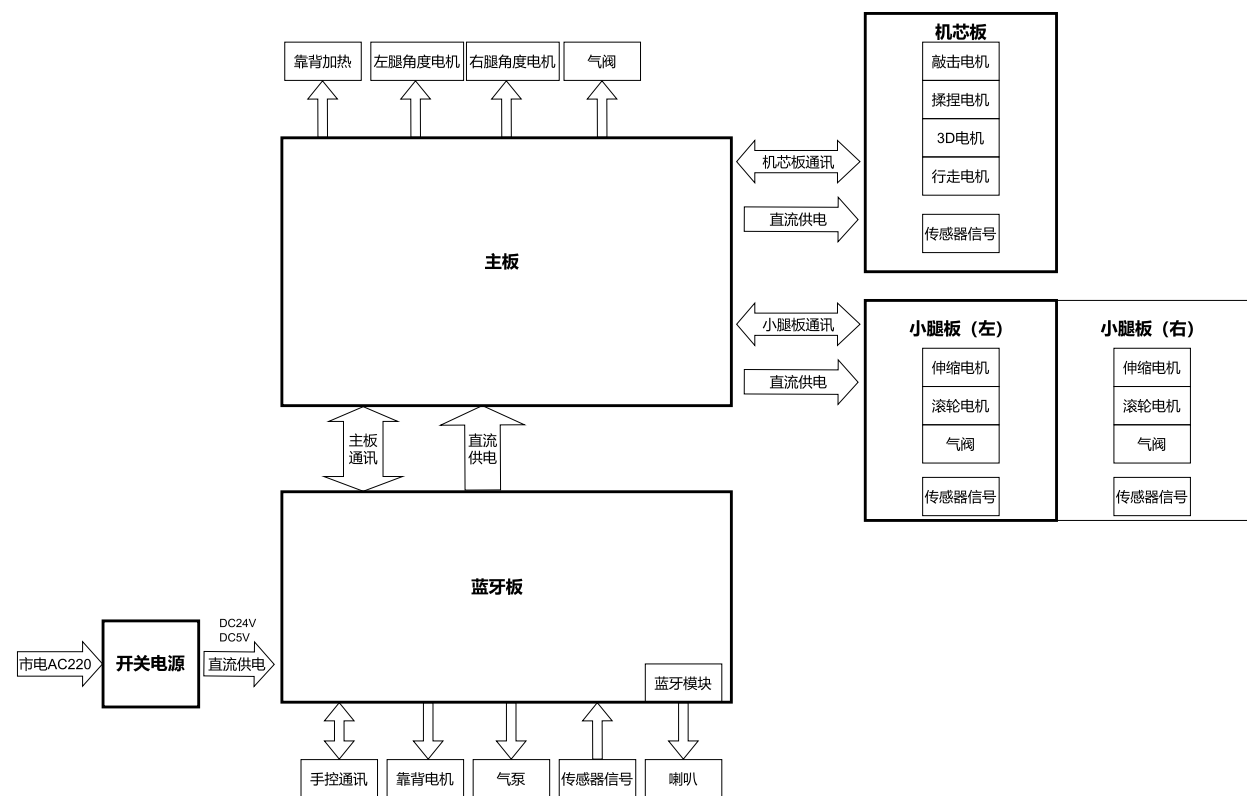

保修卡

顾客	姓 名：		保修期限	一年
	地 址：			
	电 话：			
	购 买 日 期：			
本保修卡各栏请详细填写 01、本产品自购买日一年内在正常使用状况下免费服务。 02、超过上项所定期限如需更换零配件，则酌情收取检修费。 03、在保修期间，若有下类情形恕不免费修理。 a、未能出示保修卡或购买凭证(发票或收据)者。 b、超过保修范围的维修。 c、因拆装或改造而造成的损坏。 d、因错误疏忽使用或人为使用不当造成发损坏。 e、非一般家庭使用（如长时间使用于环境恶劣的场所)所造成之故障或损害者。 f、外观因使用而自然污旧者。		检 验 员		
		经 销 商 签 章		